




AWC®duo – Montageanleitung


	Art.-Nr. 200.57.05	Art.-Nr. 200.57.06
Endoskopdurchmesser	9,8–11,5 mm	11,5–13,5 mm
Einföhrlänge Endoskop	103–110 cm	160–170 cm

Aufbauvideo

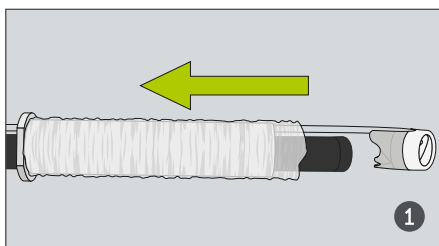


Das Röhrchen mit dem Endoskopüberzug auf den Endoskopschaft schieben.


WICHTIG: Endoskopspitze und flexible Kappe mit Wasser befeuchten.

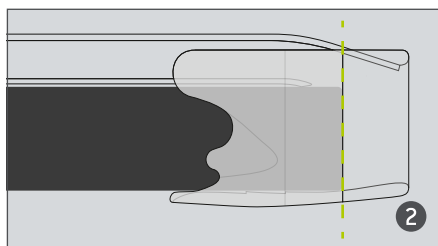


Flexible Kappe mit Hilfe der Lasche auf die Endoskopspitze schieben, bis die Endoskopspitze an den transparenten Teil der Kappe reicht.

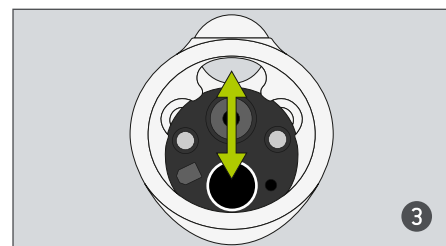


AWC®duo Arbeitskanal für die Anwendung geeignet positionieren. Für maximalen Abstand empfiehlt sich eine gegenüberliegenden Positionierung der Arbeitskanäle.

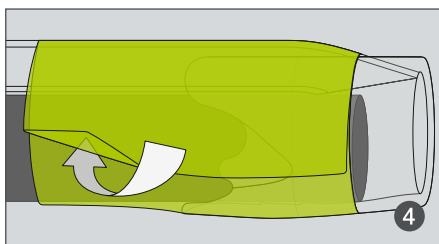


Einen Klebestreifen auf den transluzenten Teil der Kappe und den Endoskopschaft kleben. Eine Ecke des Klebestreifens umknicken für leichtere Demontage.

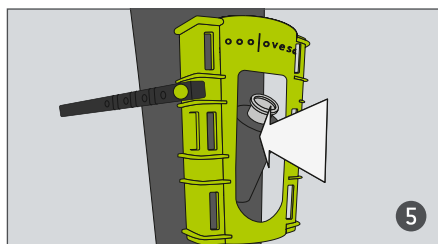


Einlassventil vom Endoskop-Arbeitskanal entfernen. Befestigungsspanne auf das Endoskop drücken.

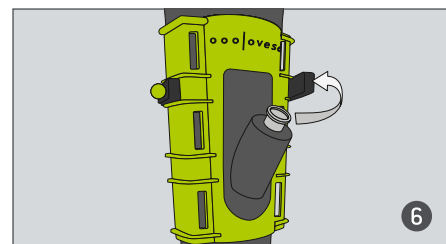


Befestigungsspanne mit dem schwarzen Befestigungsband fixieren.

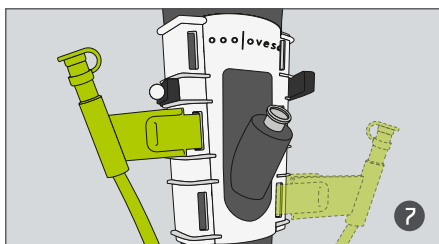


Konnektor nach Präferenz des Anwenders links oder rechts an der Befestigungsspanne befestigen und Einlassventil des zusätzlichen Arbeitskanals schließen.

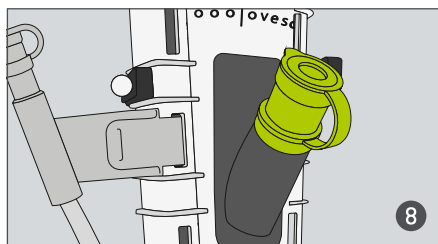


Das geschlossene Einlassventil wieder auf den Arbeitskanaleingang des Endoskops montieren.

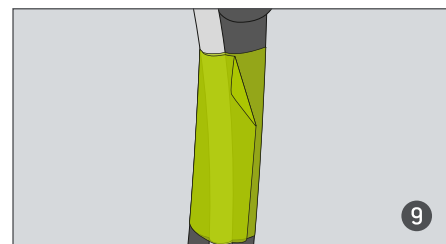


AWC®duo Arbeitskanal unterhalb des Endoskophandgriffs mit einem Klebestreifen am Endoskopschaft fixieren.

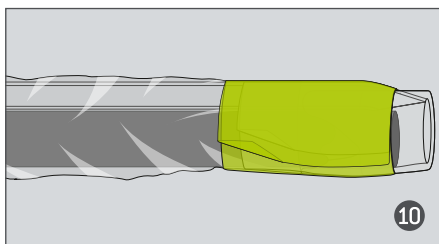

Endoskopüberzug zur flexiblen Kappe vorschieben und an der Lasche positionieren. Klebestreifen auf dem bereits vorhandenen Klebestreifen positionieren, so dass der Überzug an der flexiblen Kappe fixiert ist.

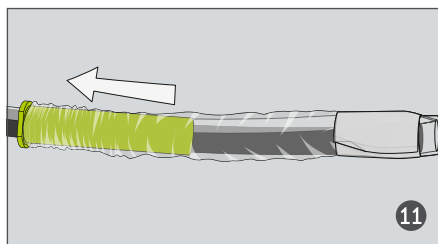

Endoskopüberzug mit Hilfe des Röhrchens bis zum proximalen Ende des Endoskops zurückziehen. Überzug vollständig vom Röhrchen abrollen.

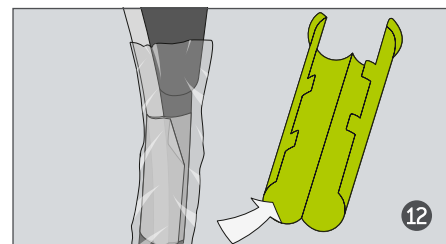

Röhrchen entfernen. Überzug zum proximalen Ende hin glätten, sodass am distalen Ende kein überschüssiges Material vorhanden ist.