




All-In-One Snare Probe

5 Funktionen in einem Instrument

- Einfach und benutzerfreundlich, nahtlose Verfahrensintegration
- Ermöglicht eine Vielzahl von Verfahren ohne Instrumentenwechsel
- Ermöglicht Hybridtechniken wie Hybrid-ESD, ohne den üblichen Arbeitsablauf zu verändern

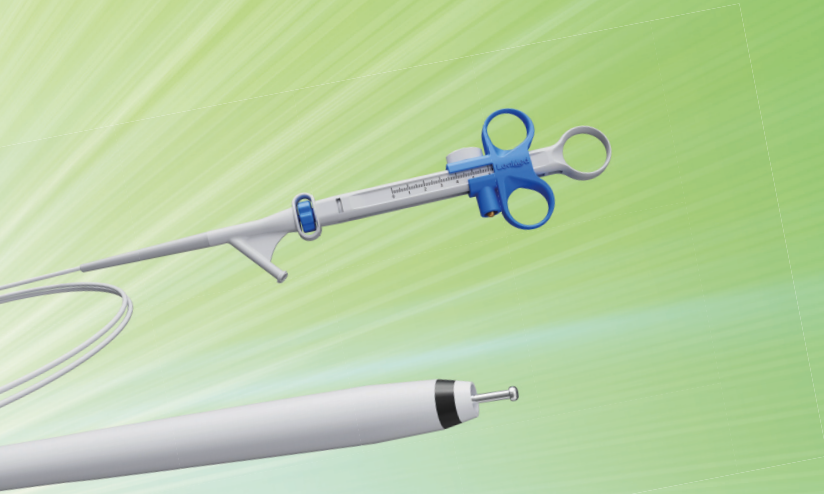


All-In-One Snare Probe

Details und Komponenten

Dank ihres innovativen Designs vereint die All-In-One Snare Probe fünf essentielle Funktionen für endoskopische Verfahren im GI-Trakt in einem einzigen Instrument:

- Markierung & Koagulation
- Inzision
- Dissektion
- Submukosale Nach-Injektion
- Polypektomie


Die präzise Steuerung und die synchron rotierende Schlinge sorgen für eine komfortable Handhabung und Durchführung des Eingriffs. Durch die Integration einer Schlinge und eines Messers in einem einzigen Instrument ist dieses Instrument optimal auf die Anforderungen moderner endoskopischer Eingriffe ausgelegt.

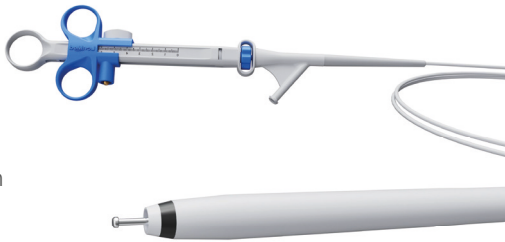


Technische Spezifikationen

 ALL-IN-ONE SNARE PROBE	Handgriff- Typ	Schlingen- form	Schlingen- öffnungsweite [mm]	Schlingentyp	Arbeits- länge [mm]	Spitzen- länge [mm]	Erforderlicher Arbeitskanal [mm]	Ref.Nr.
All-In-One Snare Probe	rotierend	oval	25	weich	2400	1,5	3,2	L24RA2425SF


Anwendung

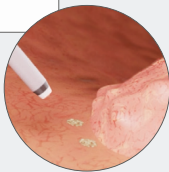


Markierung/Koagulation

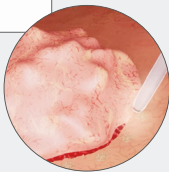

Inzision und Dissektion

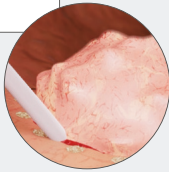

Submukosale
Nach-Injektion

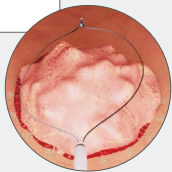

Polypektomie

Source: Leo Medical Co., Ltd.

AIO Snare Probe_FL_deu_Rev1_2025-12-04_800166
Weitere Informationen und Produktdetails finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



Ovesco Endoscopy AG
Friedrich-Miescher-Str. 9 | D-72076 Tübingen
+49 (0) 7071 96528-160 | service@ovesco.com
www.ovesco.com



Leo Medical Co., Ltd.
www.leomed.cn/en