


## Anwendungsfokus

# Entfernung von Fremdkörpern und Nahrungsboli

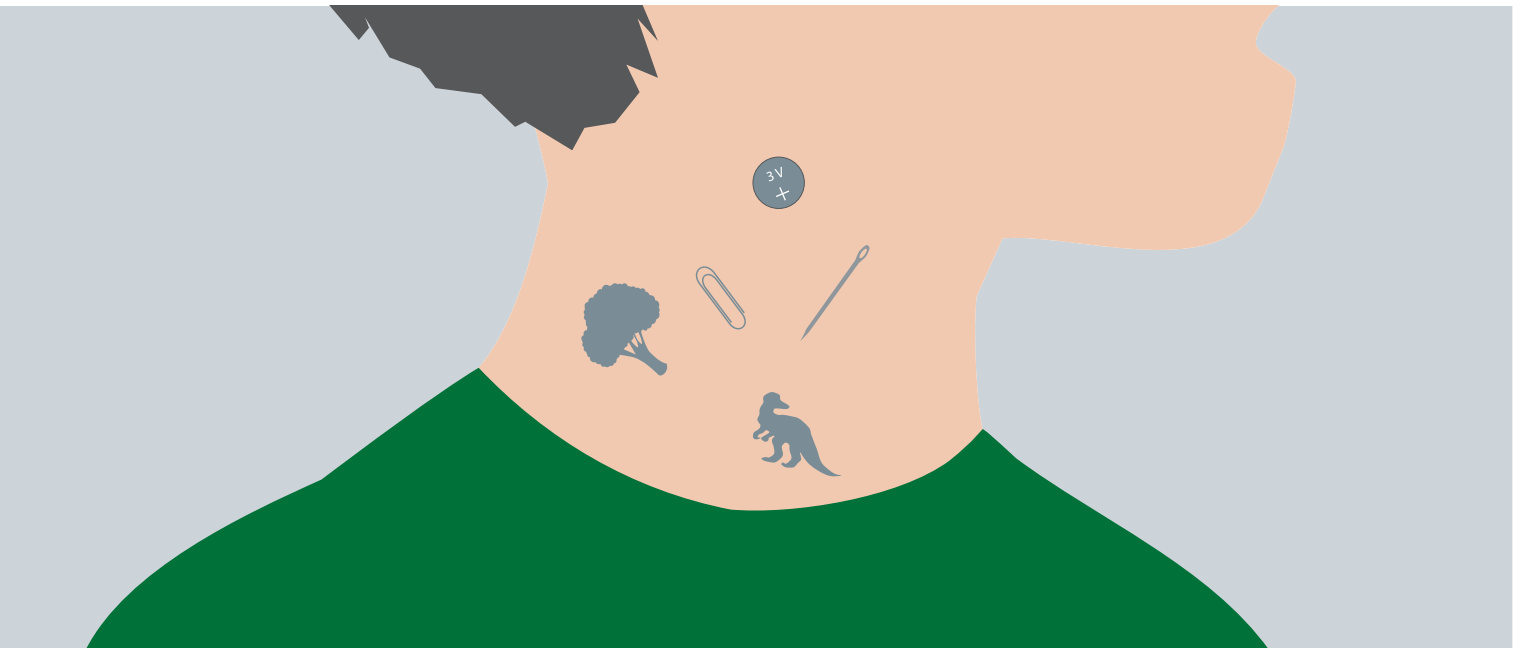

Die nötige Entfernung von verschluckten Fremdkörpern und Nahrungsboli tritt häufig im klinischen Alltag auf. Etwa 80–90 % der verschluckten Fremdkörper gehen spontan ab. 10–20 % bleiben jedoch in der Speiseröhre stecken und müssen daraufhin entfernt werden.<sup>1</sup>

Allein 2021 wurden in Deutschland über 15.000 Prozeduren zur Fremdkörper- und Speisebolusentfernung aus dem Ösophagus durchgeführt.<sup>2</sup> Ovesco bietet speziell für diese schwierigen Fälle Instrumente zur sicheren und einfachen Entfernung.



Speiseboli oder scharfe Objekte im Ösophagus: Entfernung sollte in Notfällen innerhalb von 2 h erfolgen



Stumpfe und kleine Objekte: Meist einfach und komplikationsarm mit Fasszangen oder Schlingen entfernbar



Verschluckte Magnete oder Batterien erfordern sofortige Maßnahmen zur Entfernung



Faserige, schwer fassbare Nahrungsboli oder anverdaute Tabletten: Konventionelle Instrumente stoßen an ihre Grenzen



Blutkoagel und Nekrosegewebe: Herkömmliche Instrumente nur bedingt effektiv



Scharfe Gegenstände erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen des Ösophagus zu vermeiden

# Wählen Sie Ihr Tool für die Entfernung von Fremdkörpern und Nahrungsboli

## FBR Set

- Das FBR Set ist speziell für die sichere Bergung von scharfkantigen Fremdkörpern geeignet
- Fremdkörperentfernungsset mit Greifer und Kappe
- Greifer zur optimalen Fremdkörperfixierung dank starker Haltekraft durch Alligator- und Rattenzahngeometrie
- Sichere Bergung von scharfen Objekten mithilfe der langen und elastischen Kappe

- 2 Sets pro Packung
- Art. Nr. 400.05




 FBR SET

## OTSG Xcavator®

- Extragroße Fassungskapazität ermöglicht eine einfache Entfernung von Blutkoageln, Nahrungsboli und Fremdkörpern
- Effektive Ausräumung durch enormes Greifvolumen
- Mühelose endoskopische Einführung durch konisches Design und transparente Schaufeln
- Freibleibender Arbeitskanal für simultane Nutzung weiterer Instrumente bzw. Saugung und Spülung

- 2 Stück pro Packung
- Art. Nr. 200.15

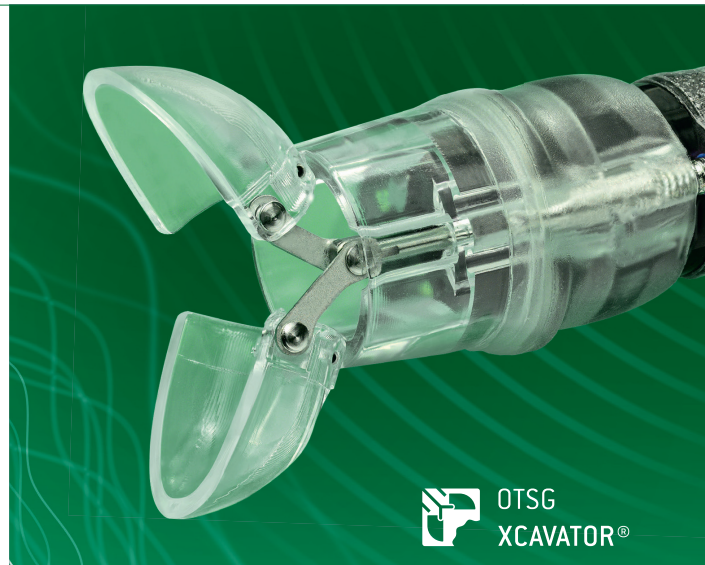

 OTSG XCAVATOR®

<sup>1</sup>Birk M, Bauerfeind P, Deprez P H, Häfner M, Hartmann D, Hassan C, Hucl T, Lesur G, Aabakken L, Meining A. Removal of foreign bodies in the upper gastrointestinal tract in adults: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline. Endoscopy. 2016; 48(05): 489-496.

<sup>2</sup>InEK-Daten 2021 für OPS 8-100.6 und 8-100.8; eigene Berechnungen